



PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

KATALOG WÓZKÓW SPECJALNYCH SPACEROWYCH

www.mywam.pl



UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa handlowego, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

Grizzly

PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek spacerowy specjalny GRIZZLY przeznaczony jest dla dzieci z różnymi dysfunkcjami ruchowymi oraz jednostkami chorobowymi, w wyniku których ruch jest znacznie utrudniony lub niemożliwy. Jest on odpowiedni dla dzieci o wzroście od 85 do 140 cm i wadze do 45 kg.

GRIZZLY wyposażony jest w kompleksowy system stabilizacji na poziomie głowy, tułowia i bioder składający się z pelot regulowanych zarówno na wysokość, szerokość, głębokość, jak i pod kątem. Co więcej, dzięki systemowi „ROSNĘZ TOBA” możliwa jest precyzyjna regulacja głębokości siedziska oraz wysokości oparcia. W połączeniu z regulowaną wysokością podnóżka otrzymujemy sprzęt idealnie dostosowany do potrzeb dziecka, który posłuży Wam przez wiele lat.

Oprócz wielu przydatnych funkcji, takich jak KOŁYSKA czy siedzisko z możliwością obracania względem kierunku jazdy, wózek GRIZZLY może pochwalić się również pozytywnym wynikiem TESTÓW ZDERZENIOWYCH ISO 7176-19, co pozwala na wykorzystanie go do przewożenia dzieci w wózku w pojazdach do tego przystosowanych.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

TAPICERKA
imitacja lnu



RAMA
lakierowana / błysk



TAPICERKA
imitacja lnu



RAMA
lakierowana / błysk



TAPICERKA
imitacja lnu



RAMA
lakierowana / błysk



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



0°-30°

4 pozycje

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



ok. 91°-212°

6 pozycji

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



55°-215°

5 pozycji

ROSNEŹ Z TOBĄ

regulacja parametrów



Zaletą wózka GRIZZLY jest system „ROSNEŹ Z TOBĄ”. Możliwość dopasowania głębokości siedziska do 37 cm, wysokości oparcia do 70 cm i możliwość obniżenia podnóżka do 40,5cm poniżej poziomu siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania, przez co wózek może Wam posłużyć przez długie lata.

KOMPLEKSOWA STABILIZACJA

regulowane peloty



Trzy pary pelot na poziomie głowy, klatki piersiowej i bioder posiadające szeroki zakres regulacji zarówno w pionie, poziomie, na głębokość i pod kątem zapewniają wyjątkową stabilizację, bezpieczeństwo oraz komfort podróżującemu w wózku dziecku. Elementy boczne siedziska stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka GRIZZLY pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPATKOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego GRIZZLY umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



Daszek z okienkiem



Regulowane peloty

Podnóżek z regulacją wysokości i kąta pochylenia



Barierka zabezpieczająca

Blokada kierunku jazdy

Łatwy system montażu kół



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



regulowane peloty



elementy boczne oparcia



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



daszek z okienkiem



barierka zabezpieczająca



kosz na zakupy



torba turystyczna



stolik terapeutyczny



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



zestaw MIŚ GRIZZLY



folia przeciwdeszczowa



śpiwór na nogi



moskitiera



zestaw MIŚ GRIZZLY

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 18*- 40 cm



głębokość siedziska 25 - 37 cm



wysokość oparcia 57 - 70 cm



regulacja podnóżka 23 - 40,5 cm



wymiary po złożeniu: rama L 96 x W 65 x H 51 cm / siedzisko L 72 x W 43 x H 47 cm



waga wózka 20 - 24 kg



długość wózka 82 - 135 cm



wysokość wózka 108 - 125 cm



szerokość wózka 65 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 85 - 140 cm



max waga 45 kg


* z pelotami



MyWam Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów
NIP: 627 277 18 61

biuro@mywam.pl

KONTAKT W REGIONACH

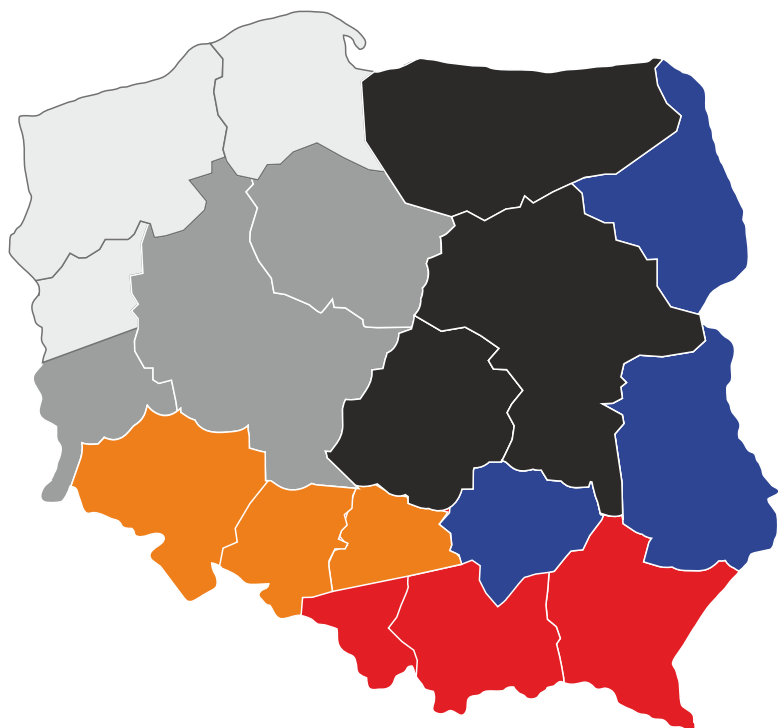

kom.: +48 533 220 169

województwa:

Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie.

kom.: +48 531 790 664

województwa:

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 535 555 694

województwa:

Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813

województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie.

kom.: +48 798 026 502

województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 297

województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.