



PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

KATALOG WÓZKÓW SPECJALNYCH SPACEROWYCH

www.mywam.pl



UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa handlowego, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

Mewa

PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek inwalidzki specjalny MEWA jest przeznaczony dla dzieci, które nie są w stanie chodzić lub siedzieć we właściwej pozycji z powodu kontuzji lub innego schorzenia. Ten wózek jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 90 do 125 cm i wadze do 40 kg.

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka w wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie wpływa na komfort podróżowania.

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk



TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



5,5°-21,5°

4 pozycji

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



8° - 86°

4 pozycji

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



64° - 180°

5 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

zestaw wkładek



Wózek MEWA można doposażyć w zestaw wkładek spływających i zwężających, które pozwalają na zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka - w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam jeszcze dłużej.

INDYWIDUALNA STABILIZACJA

regulowane peloty



Dwie pary pelot (na poziomie głowy i tułowia) o szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu dla dziecka.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka MEWA pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPATKOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego MEWA umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdnny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładka spływająca



wkładki zwężające



wkładka spływająca



regulowane peloty



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca



stolik terapeutyczny



torba turystyczna



kosz na zakupy



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 25* / 32 cm



głębokość siedziska 24* / 28 cm



wysokość oparcia 62 cm



regulacja podnóżka 17 - 32 cm



wymiary po złożeniu: rama L 84 x W 64 x H 26 cm / siedzisko L 88 x W 43 x H 42 cm



waga wózka 20 - 28 kg



długość wózka 94 - 126 cm



wysokość wózka 124 - 129 cm



szerokość wózka 65 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 90 - 125 cm



max waga 40 kg


* z wkładkami zwężającymi / spływającymi



MyWam Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów
NIP: 627 277 18 61

biuro@mywam.pl

KONTAKT W REGIONACH

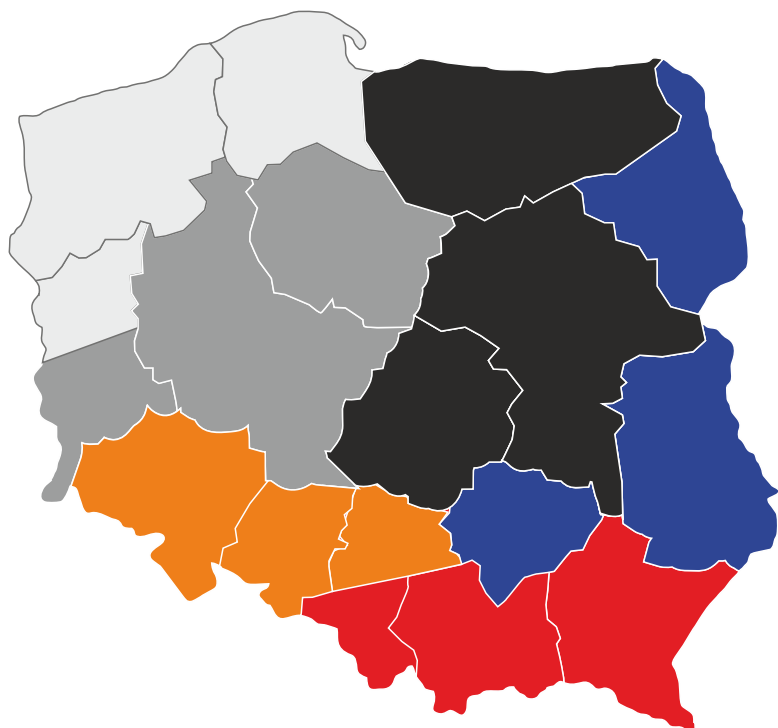

kom.: +48 533 220 169

województwa:

Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie.

kom.: +48 531 790 664

województwa:

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 535 555 694

województwa:

Warmińsko - Mazurskie, Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813

województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie.

kom.: +48 798 026 502

województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 297

województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.